

ІСХ-ХИРУРГИЧЕСКИЙ ПРОТОКОЛ

...дополненный хирургический протокол для имплантатов ICX







Имплантологическая система FAIR

ІСХ-ХИРУРГИЧЕСКИЙ ПРОТОКОЛ



ICX-Shop: www.medentis.de





Содержание

Стра	аницы
Цветовая кодировка сверл ICX4	- -5
Хирургические процедуры с использованием ICX-mini диаметром 2,9 мм6-	-9
Особенности протезирования с использованием всех имплантатов ICX-plus10)-11
Хирургические процедуры с использованием имплантатов ICX-plus диаметром 3,45мм 12-	-15
Хирургические процедуры с использованием имплантатов ICX-PREMIUM диаметром 3,75мм16-	19
Хирургические процедуры с использованием имплантатов ICX-PREMIUM диаметром 4.1мм20-2	23
Хирургические процедуры с использованием имплантатов ICX-PREMIUM Ø 4,8мм 24-2	27
Verrationica traditional ICV	Ω



Цветовая кодировка сверл ІСХ

Сверла ICX-plus для имплантатов диаметром 3.45 имеют желтую марки-ровку. Количество полос желтого цвета означает степень твердости кости (очень мягкая, мягкая, твердая).



- 1 желтая полоса означает очень мягкую кость D4
- 2 желтых полосы означают очень мягкую/средней мягкости кость D3/D2
- З желтых полосы означают твердую кость D1

Сверла ICX-plus для имплантатов диаметром 3.75 имеют красную марки-ровку. Количество полос красного цвета означает степень твердости кости (очень мягкая, мягкая, твердая).



- 1 полоса означает очень мягкую кость D4
- 2 полосы означают очень мягкую/средней мягкости кость D3/D2
- 3 полосы означают твердую кость D1

Сверла ICX-PREMIUM для имплантатов диаметром 4.1 имеют зеленую мар-кировку. Количество полос зеленого цвета означает степень твердости кости (очень мягкая, мягкая, твердая).




- 1 полоса означает очень мягкую кость D4
- 2 полосы означают очень мягкую/средней мягкости кость D3/D2
- 3 полосы означают твердую кость D1

Сверла ICX-PREMIUM для имплантатов диаметром 4.8 имеют голубую . маркировку. Количество полос голубого цвета означает степень твердости кости (очень мягкая, мягкая, твердая).



- 1 полоса означает очень мягкую кость D4
 - 2 полосы означают очень мягкую/средней мягкости кость D3/D2
 - 3 полосы означают твердую кость D1

Объяснение цветовой кодировки сверл ІСХ

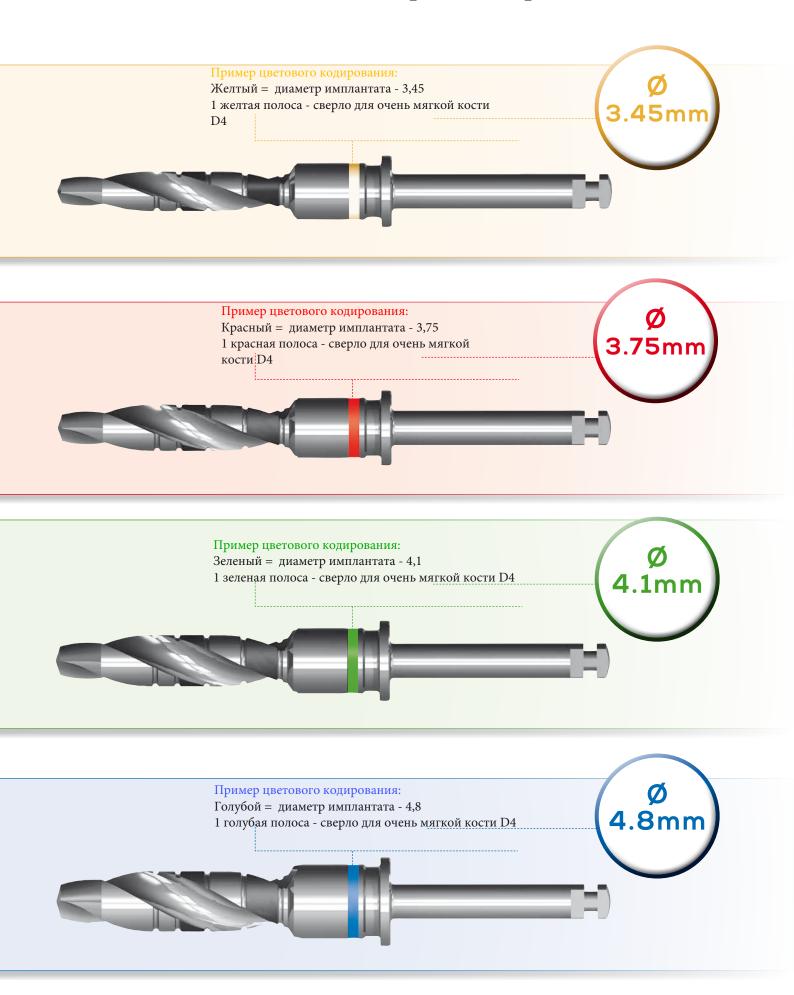

Объяснение цветовой Сверла ICX-mini® - 2,9 мм



Примечание:


Имплантат ICX-тіпі диаметром 2,9 мм предназначен для использования с шаровыми абатментами системы t-ессо.

Он использование для установки всех протезов, кроме протезов системы t-ecco.

Используется только при наличии особых показаний.



Хирургические процедуры с использованием ICXmini 0 2,9 мм

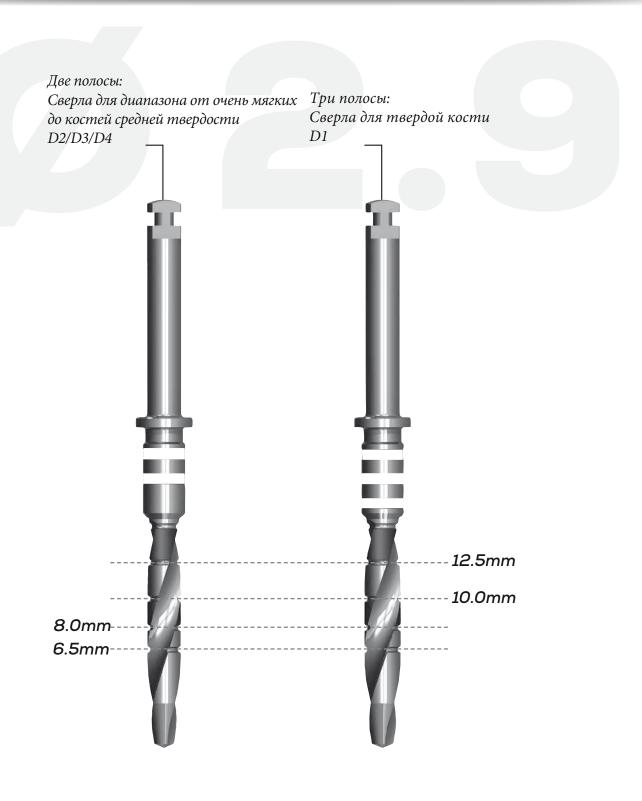








Последовательность сверления D2/D3 / D4 с исполь-зованием ICX-mini® 0 2,9 мм

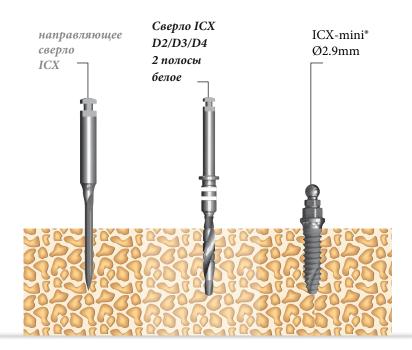

Последовательность сверления для очень мягкой кости и кости средней твердости.

Пожалуйста, используйте сверла только с 2 цветовыми полосами.


Примечание: Сверла для диапазона от очень мяг-ких до костей средней твердости D2/D3/D4 помечены 2 белыми полосами









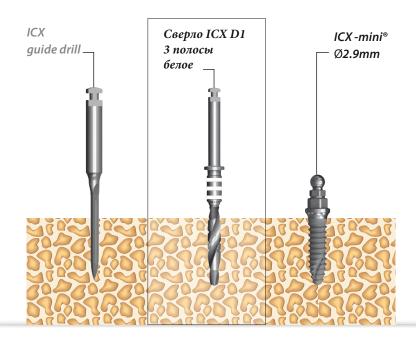

Последовательность сверления для твердой кости.

Пожалуйста, используйте сверла только с 3 цветовыми полосами.

Примечание: Сверла для твердой кости D1,

помечены 3 белыми полосами









Особенности протезирования с использованием всех имплантатов ICX-plus.

Особенности всех имплантатов ICX-plus.

Слепочные штифты закрепляют на имплантаты ICX и ICX-plus по технологии открытой и зарытой ложки. Тем не менее, универсальные лабораторные аналоги отличаются.

Поэтому важно, чтобы зубной техник был проинформирован о том, был ли установлен имплантат ICX или ICX-plus.

Это особенно относится к очень низким максимумам слизистой оболочки, где использование имплантата ICX-plus предполагает абатмент с высотой десны 0 мм.

Данный прямой титановый абатмент с высотой десны 0 мм был специально разработан для им-плантатов ICX-plus и подходит только для них. Все остальные компоненты протезирования под-ходят как для имплантатов ICX, так и для имплантатов ICX-plus.

У вас остались вопросы?

За дополнительной информацией обращайтесь по телефону:

Тел.: +49 (0)2641 9110-0

E-Mail: info@medentis.de www.medentis.de


Важное Примечание!

Важное примечание для процедур протезирова-ния с использованием всех имплантатов ICX-plus.

Особенность всех имплантатов ICX-plus.




Для имплантата ICX-plus 0 3.45 mm мы ре-комендуем использовать универсальный лаборатор-ный аналог ICX-plus **C-006-010002**.

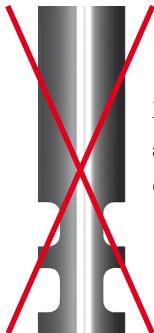

Мы не рекомендуем использовать аналог с артикулом C-006-010001 ICX-plus implant Ø 3.45mm!

Важное примечание!

Хирургические процедуры с использованием ICX-plus® диаметром 3,45мм

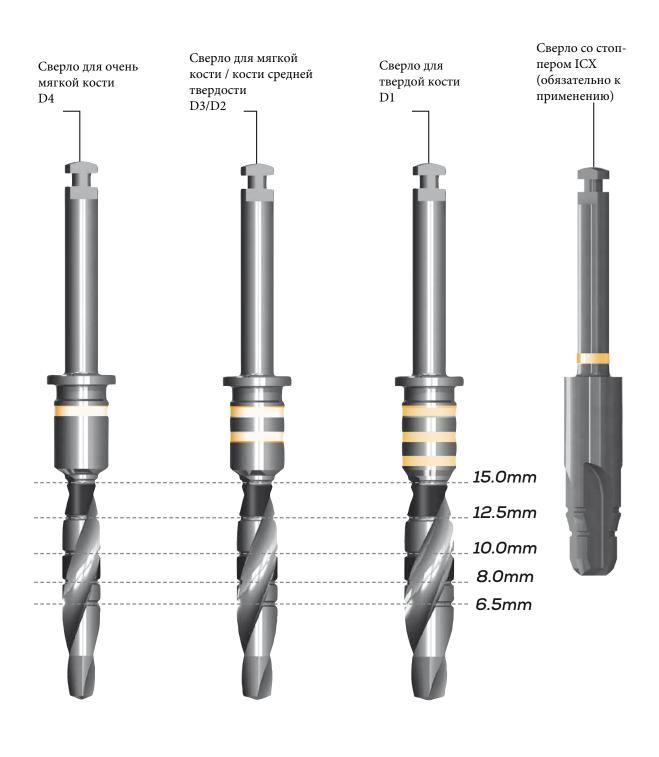








Последовательность сверления D4 с ис-пользованием ICX-plus® диаметром 3.45 мм

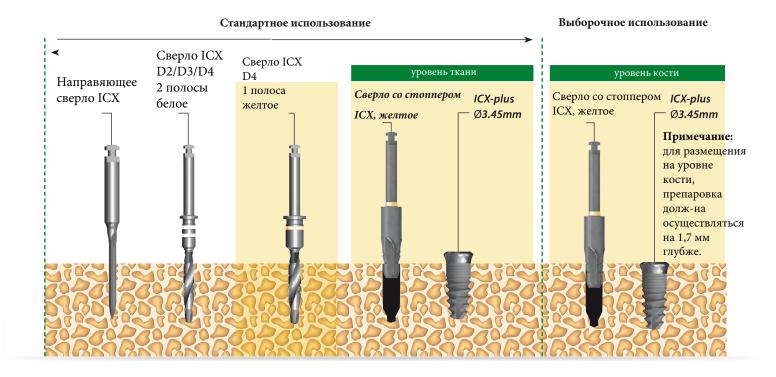

Последовательность сверления для очень мягкой кости

Пожалуйста, используйте сверла только с 1 цветовой полоской

Примечание: Сверла для очень

мягкой кости D4 помечены 1

желтой полосой










Последовательность сверления D2/D3 с использова-нием ICX-plus® диаметром 3,45 мм

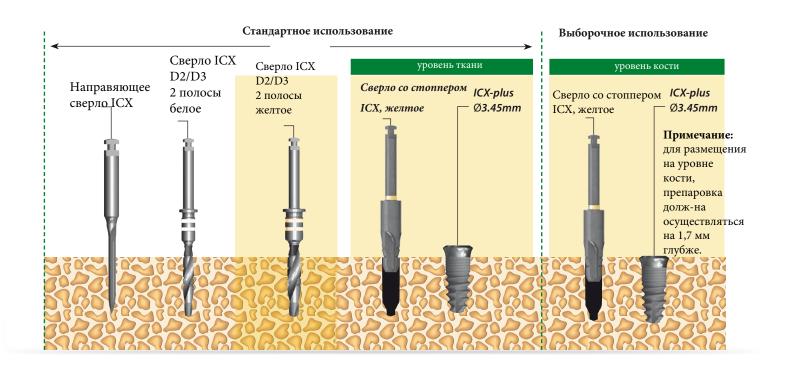

Последовательность сверления для диапазона от мягкой кости до кости средней твердости

Пожалуйста, используйте сверла только с 2 цветовыми полосами.

Примечание: Сверла для очень мягкой ко-сти и

костей средней твердости D2/D3










Последовательность сверления D1 с использова-нием ICX-plus диаметром 3,45 мм

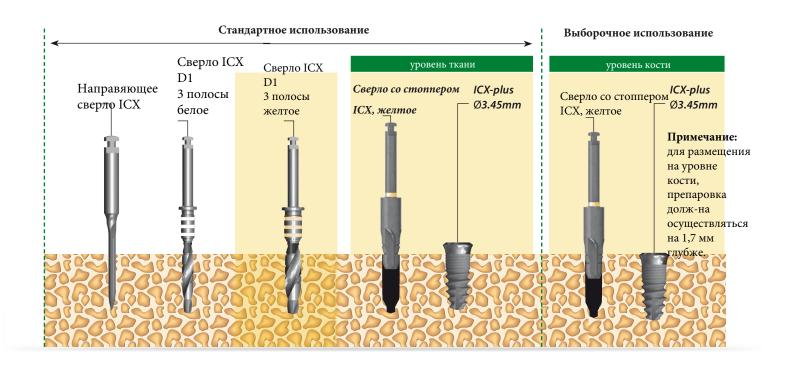

Последовательность сверления для твердой кости.

Пожалуйста, используйте сверла только с 3 цветовыми полосами.

Примечание: Сверла для твердых костей D1,

помечены 3-мя желтыми полосаи










Хирургические процедуры с использованием ICX-PREMIUM диаметром 3,75мм **Ø 3.75mm**

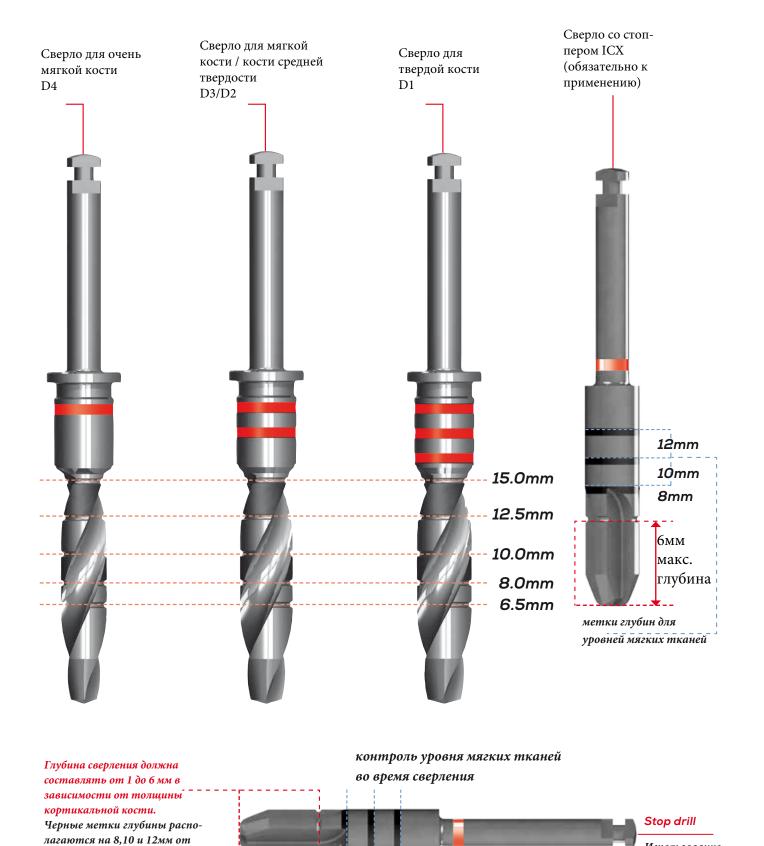

12mm

8mm

10mm

Использование

является обя-

зательным

для полного

завершения

препаровки места имплантации

наконечника сверла и позво-

тканей интраопераци-онно..

ляют определять уровни мягких


6mm

max.

drilling

depth

Последовательность сверления D4 с использованием ICX-PREMIUM диаметром 3,75 мм

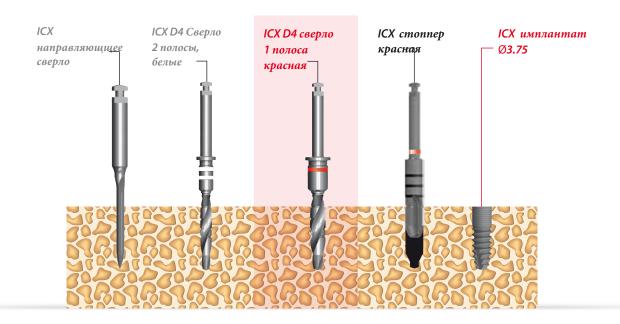

Последовательность сверления для очень мягкой кости

Пожалуйста, используйте сверла только с 1 цветовой полосой.

Примечание: Сверла для очень мягкой кости D4,

помечены 1 красной полосой










Последовательность сверления D2/D3 с использованием ICX-PREMIUM **Ø 3.75mm**

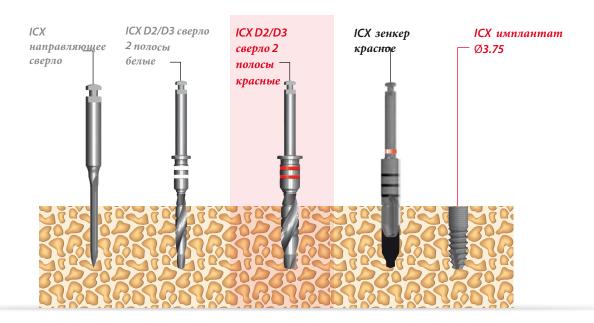

Последовательность сверления для диапазона от мягкой кости до кости сред-ней твердости

Пожалуйста, используйте сверла только с 2 цветовыми полосами.

Примечание: Сверла для очень мягкой кости и костей средней твердости D2/D3,

помечены 2 красными полосами










Последовательность сверления D1 с использованием ICX-PREMIUM Ø 3.75mm

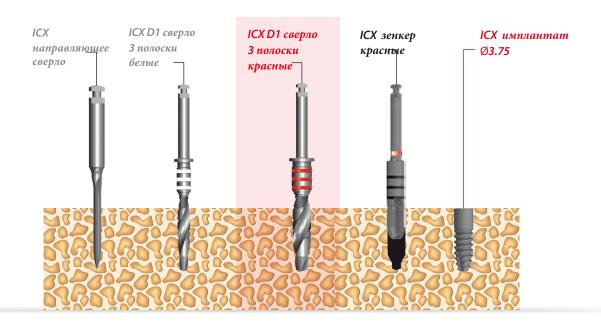

Последовательность сверления для твердой кости.

Пожалуйста, используйте сверла только с 3 цветовыми полосами.

Примечание: Сверла для твердой кости D1, помечены 3 красными полосами











Хирургические процедуры с использовани-ем ICX-PREMIUM диаметром 4,1мм

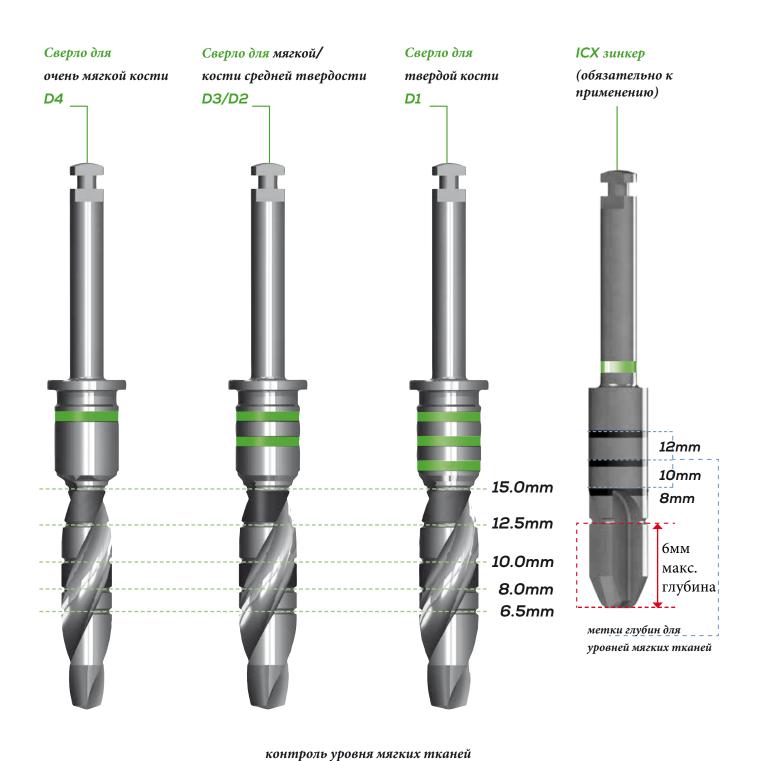

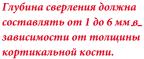

Черные метки глубины располагаются на 8,10 и 12мм от наконечника сверла и позволяют определять уровни мягких тканей интраопераци-онно..

макс.

глубина

во время сверления 6мм

12mm


8mm

10mm

Зенкер

Использование является обязательным для полного завершения препаровки места имплантации

Последовательность сверления D4 с использованием ICX-PREMIUM **Ø 4.1mm**

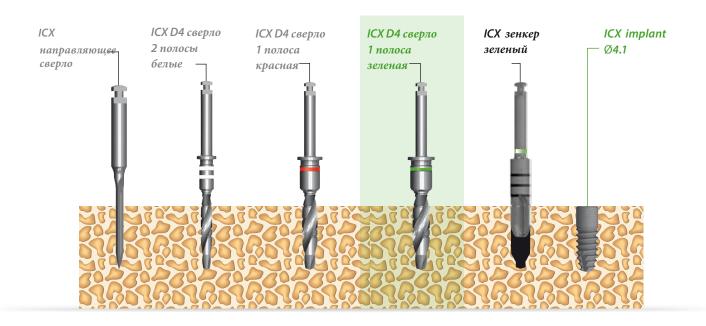

Последовательность сверления для очень мягкой кости

Пожалуйста, используйте сверла только с 1 цветовой полосой.

Примечание: Сверла для очень мягкой кости

D4

помечены 1 зеленой полосой










Последовательность сверления D2/D3 с использованием ICX-PREMIUM **Ø 4.1mm**

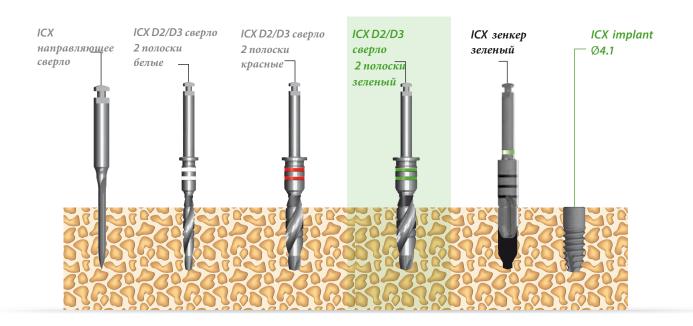

Последовательность сверления для диапазона от мягкой кости до кости сред-ней твердости

Пожалуйста, используйте сверла только с 2 цветовыми полосками.

Примечание: Сверла для очень мягкой кости и костей средней твердости D2/D3,

помечены 2 зелеными полосами










Последовательность сверления D1 с использованием ICX− PREMIUM **Ø 4.1mm**

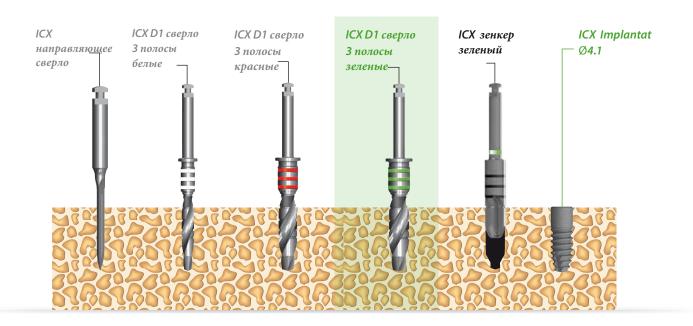

Последовательность сверления для твердой кости

Пожалуйста, используйте сверла только с 3 цветовыми полосками.

Примечание: Сверла для твердой кости D1,

помечены 3 зелеными полосами










Хирургические процедуры с использованием ICX-PREMIUM диаметром 4,8мм

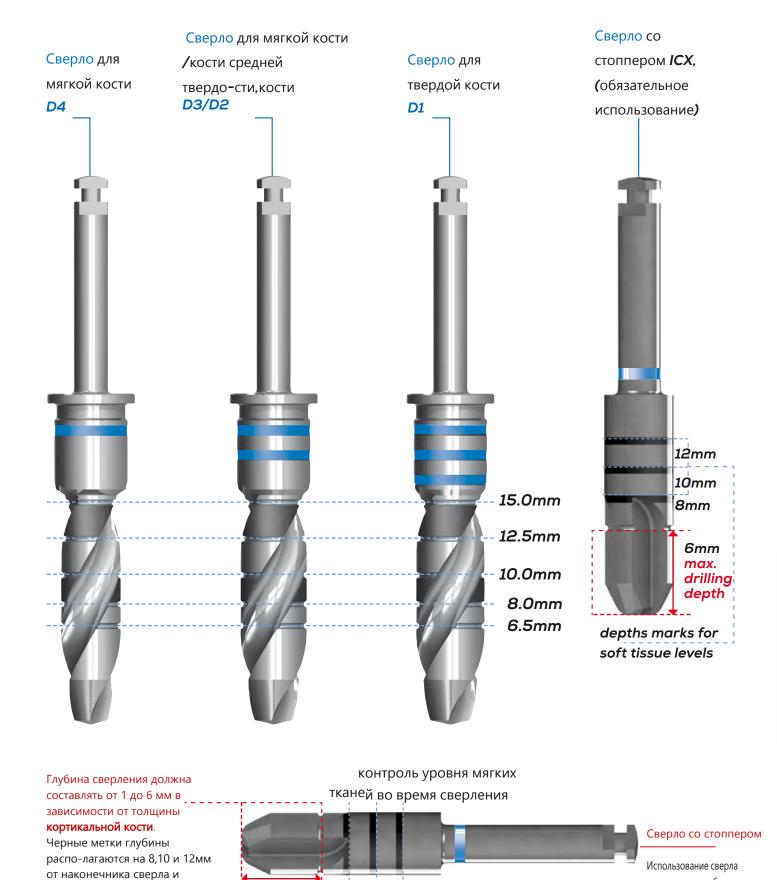

8мм 12мм

6мм

макс.

глуби-на

со -стоппером обя-зательно

для полного завер-шения

препа-ровки места


имплантации

позво-ляют определять уровни

мягких тканей

интраопераци-онно

Последовательность сверления D4 с использовани-ем ICX-PREMIUM диаметром 4,8 мм

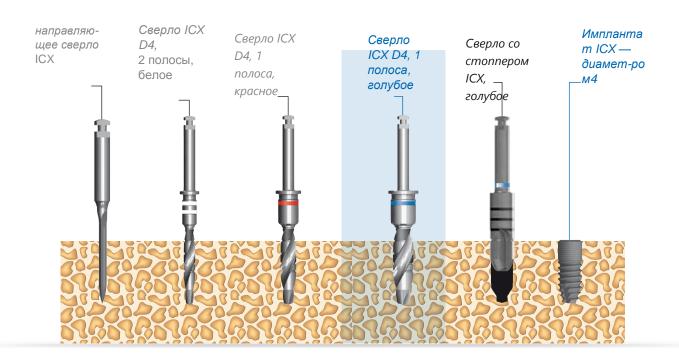

Последовательность сверления для очень мягкой кости

Пожалуйста, используйте сверла только с 1 цветовой полосой.

Примечание: Сверла для очень

мягкой кости **D4**, помечены 1












Последовательность сверления D2/D3 с ис-пользованием ICX-PREMIUM диаметром 0 4,8мм

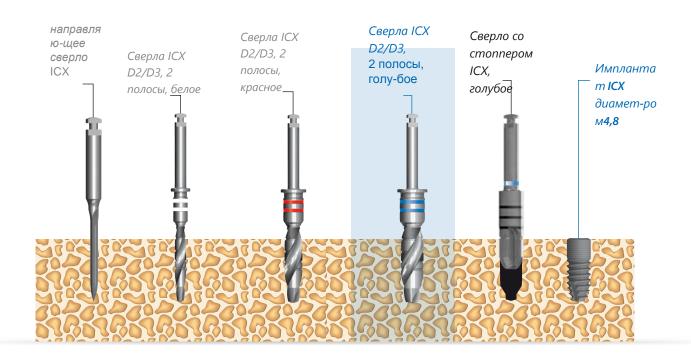

Последовательность сверления для диапазона от мягкой кости до кости средней твердости

Пожалуйста, используйте сверла только с 2 цветовыми полосами.

Примечание: Сверла для очень мягкой кости и костей сред-ней твердости D2/D3,

помечены 2 голубыми полосами










Последовательность сверления D1 с использова-нием ICX-PREMIUM диаметром 0 4,8 мм

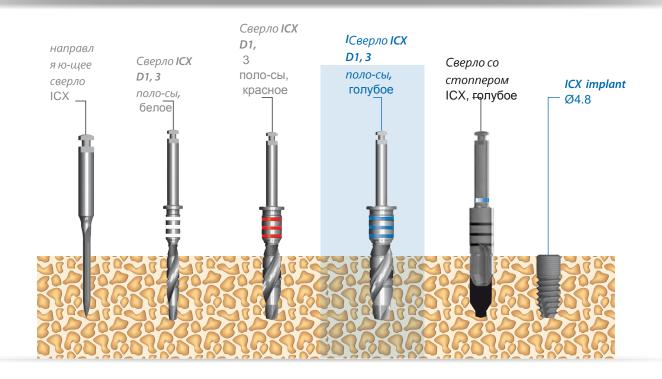

Последовательность сверления для твердой кости.

Пожалуйста, используйте сверла только с З цветовыми полосами.

Примечание: Сверла для твердой кости

D1, помечены **3** голубыми полосами









Манипуляции и введение ICX-PREMIUM

Динамометрический ключ ICX, короткий и средний



Совместим с ручным и локтевым переходниом

Динамометрический ключ ICX, помещенный в отвертку



Динамометрический ключ ICX, помещенный в хирургический наконечник



Стерильная блистерная упаков-ка ІСХ



Подготовка ICX-PREMIUM динамометрическим ключом ICX



Захват ICX-PREMIUM динамометрическим ключом ICX



Удаление ICX-PREMIUM из флакона с помощью динамометрического ключа ICX



Введение ICX-PREMIUM



Установка заглушки



Установленный винт-заглушка



The FAIR Implant-System



Имплантологическая система FAIR



А когда вы перейдете на ІСХ?

Имплантаты - это вопрос доверия ...

medical medical



"Медентис медикал" ГмбХ

Ул. Вальпорцхаймер, 48-52 ■ 53474 Бад-Нойенар/Арвайлер Германия

Тел.: +49 (0)2641 9110-0 ■ Email: info@medentis.de

www.medentis.de



Добро пожаловать в семью ІСХ!



	ICX-PREMIUM	(диаметром 3,75 0 4,1 0 4,8мм)
	ICX-SlimBoy	(Узкие имплантаты диаметром 3,2 03,4мм)
	ICX-ACTIVE-MASTER экстренной установки ди	(Для косметической аметром 3,75 0 4,1 0 4,8мм)
	ICX-mini	(Имплантаты диаметром 2,9mm)
(ICX-plus	(Имплантаты диаметром 3,45мм, с гладкой областью
	ICX-ACTIVE-WHITE	(Керамические имплантаты)
	ICX-MAGELLAN	(руководство к использованию - программное
		обеспечение для хирургов)

Будущее уже наступило

Обслуживание клиентов: +49(0)26419110-0 ■ www.medentis.de



ICX-SURGICAL MANUAL 7.0



medentis